

PLASMA ARC MEDIKA

Plasma ARC działa wykorzystując zjawisko plazmy, czyli jonizacji gazów zawartych w powietrzu. Generowana mikrowiązka plazmy nie powoduje przepływu prądu przez ciało pacjenta oraz przez operatora. Podczas zabiegu tworzy się niewielki łuk plazmowy, który sprawia, że naskórek przechodzi ze stanu stałego w gazowy – obkurcza się. Najważniejszym czynnikiem przy tworzeniu skutecznego urządzenia jest metoda doboru specyficznej częstotliwości prądu dla wywołania efektu plazmy. Dbając o bezpieczeństwo pacjentów, do urządzenia dodany został tryb impulsowy oraz licznik energii przekazanej do skóry. Urządzenie zostało zaprojektowane oraz wykonane w Polsce.

Urządzenie wykorzystywane jest do: nie-chirurgicznego liftingu powiek, likwidacji zmarszczek oraz usuwania zmian skórnych.

Korzyści

- 3 gotowe programy zabiegowe:
 - *blefaroplastyka powiek,
 - *likwidacja zmarszczek,
 - *usuwanie zmian skórnych,
- tryb impulsowy
- pierwsza Plasma w Polsce z płynną regulacją mocy łuku plazmowego oraz jego energii
- precyzyjne dawkowanie energii przekazanej do skóry od 10ms do 2 sekund
- licznik energii dostarczonej do skóry pacjenta
- dodatkowy tryb manualny (opcja tylko dla lekarzy)
- jednorazowe elektrody
- możliwość dowolnego dopasowania kąta elektrody
- menu w języku polskim
- ciekłokrystaliczny, dotykowy ekran
- obudowa z materiału Corian


Zastosowanie

- blefaroplastyka - nie-chirurgiczny lifting powiek,
- płytkie i głębokie zmarszczki – okolica oka, gładzina, zmarszczki „palacza”, zmarszczki przy uszach,
- lifting owalu twarzy,
- blizny, rozstępy,
- włókniaki, brodawki (płaskie, kurzajki, łojotokowe, płciowe)
- cukrzyca

Efekty

Przedstawiamy także zdjęcia PRZED oraz bezpośrednio PO użyciu naszej PLASMY ARC

PLASMA ARC

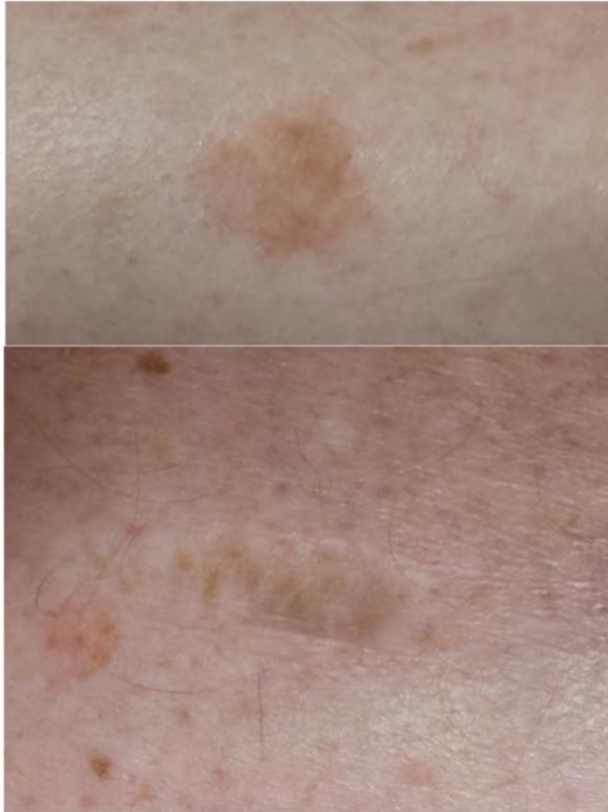

PRZED



zaraz PO zabiegu







Dane techniczne

- Wymiary: 38x29x15,5
- Waga: 4 kg
- Zaprojektowano i wyprodukowano w Polsce,
- Zasilanie – 220 V / 50 Hz
- Moc pobierania urządzenia – do 35 W